


Pipet-Lite XLS+ Multicanal

Precisão e Desempenho Superiores



Leveza

Projetada com um design ergonômico, a pipeta Pipet-Lite XLS+ proporciona extraordinário conforto e performance, mesmo após horas de pipetagem.

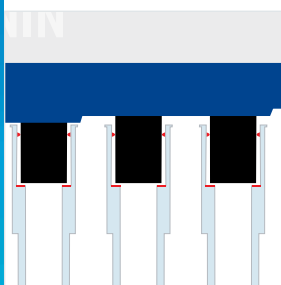

O toque mais leve

Nada supera o sistema LiteTouch da Rainin em ergonomia e facilidade de uso. O design LTS patenteado do porta-cone e da ponteira da Rainin apresenta pequena área de montagem e parada positiva, que proporcionam encaixe rápido e perfeito em todos os canais. Com LTS e ejeção progressiva, as ponteiras são ejetadas com facilidade e menor força.



Maior controle

Tecnologicamente avançada e ergonômica, a Pipet-Lite XLS+ está entre as mais fáceis e sensíveis pipetas multicanais que você já usou! O apagar êmbolo é suave e absolutamente consistente do início ao fim.



Consistência em todos os canais

Além do LTS, o design da nova haste de pressão em todas as pipetas multicanais XLS+ assegura aspiração e dispensação excepcionalmente regulares e consistentes em todos os canais.



Multicanais Pipet-Lite XLS+ Precisão e Desempenho Superior

A Pipet-Lite™ XLS+™ da Rainin está entre as pipetas multicanais manuais com tecnologia e ergonomia mais avançadas do mercado. Com a tecnologia patenteada LiteTouch™ System (LTS™) da Rainin, esta pipeta multicanal é de rápido e fácil encaixe das ponteiras, simples manuseio, proporcionando aspiração de amostras precisa e consistente em todos os canais. De fabricação robusta, com o uso dos melhores materiais do mercado, estas pipetas multicanais são projetadas para fornecer anos de performance consistente e confiável. E como todas as pipetas XLS da Rainin, o chip RFID integrado possibilita rastreamento avançado da calibração.

Pipetas Multicanais Pipet-Lite XLS+

Desempenho que você pode sentir

Funcionalidade Avançada

- Formatos de 8 e 12 canais para volumes de 1 a 1.200 µL
- LTS, para aspiração consistente da amostra em todos os canais e encaixe confiável, sem vazamento
- Encaixe rápido e fácil das ponteiros e ejeção progressiva para reduzir força
- Design ergonômico da haste com apoio ergonômico para os dedos
- Bloqueio de volume que impede oscilação acidental do volume
- Amortecedor de impacto integrado ao ejetor de ponteiros reduz estresse do polegar
- Chips RFID das pipetas para gerenciamento de ativos



Dados Técnicos

Especificações

Modelo	Volume (µL)	Incremento (µL)	Exatidão		Precisão	
			%	µL (±)	%	µL (≤)
10 µL	1,0	0,02	2,5	0,025	1,2	0,012
	5,0		1,5	0,075	0,6	0,03
	10,0		1,0	0,1	0,4	0,04
20 µL	2	0,02	7,5	0,15	2,0	0,04
	10		1,5	0,15	0,5	0,05
	20		1,0	0,2	0,3	0,06
50 µL	5	0,05	3,5	0,18	1,5	0,075
	25		1,2	0,3	0,4	0,1
	50		0,8	0,4	0,2	0,1
200 µL	20	0,2	2,5	0,5	1,0	0,2
	100		0,8	0,8	0,25	0,25
	200		0,8	1,6	0,15	0,3
300 µL	30	0,5	2,5	0,75	1,0	0,3
	150		0,8	1,2	0,25	0,375
	300		0,8	2,4	0,15	0,45
1.200 µL	100	2	3,6	3,6	0,6	0,6
	600		0,8	4,8	0,2	1,2
	1.200		0,8	9,6	0,15	1,8

Rainin, Pipet-Lite, XLS, XLS+, LTS, LiteTouch, Pipetting 360° e o logo Pipetting 360° são marcas registradas da Rainin Instrument, LLC. LabX e Direct Pipette-Scan são marcas registradas da METTLER TOLEDO.

Informações para Pedidos

Cat. N.º	Código MT	Faixa de Volume
8 canais		
L8-10XLS+	17013802	0,5–10 µL
L8-20XLS+	17013803	2–20 µL
L8-50XLS+	17013804	5–50 µL
L8-200XLS+	17013805	20–200 µL
L8-300XLS+	17013806	20–300 µL
L8-1200XLS+	17014496	100–1.200 µL
12 canais		
L12-10XLS+	17013807	0,5–10 µL
L12-20XLS+	17013808	2–20 µL
L12-50XLS+	17013809	5–50 µL
L12-200XLS+	17013810	20–200 µL
L12-300XLS+	17013811	20–300 µL
L12-1200XLS+	17014497	100–1.200 µL

Acessórios

Cat. N.º	Código MT	Descrição
KIT RFID	17011966	Kit RFID incluindo leitor RFID da Rainin e software LabX Direct Pipette-Scan
RFID-RDR	17011964	Leitor RFID da Rainin
LABX-PIPET	17011965	Software LabX Direct Pipette-Scan



Rainin Instrument, LLC

7500 Edgewater Drive, Oakland, CA 94621
Telefone +1 510 564 1600

uma Empresa METTLER TOLEDO

Sujeito a alterações técnicas

© 04/2014 Rainin Instrument, LLC

Impresso mediante pedido a partir de conteúdo online. H17701320

www.mt.com/rainin

Para mais informações